


いろいろな分取方法が実現できます

オプション


オプションでバルブ操作が可能になります。




簡単分取モード

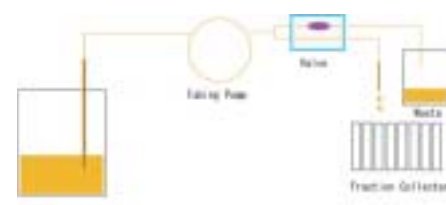

選択分取モード

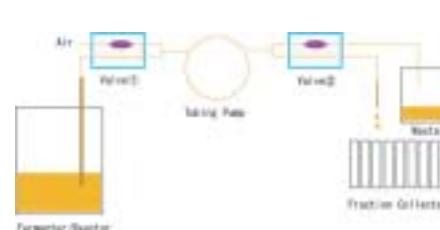

空気分節分取モード

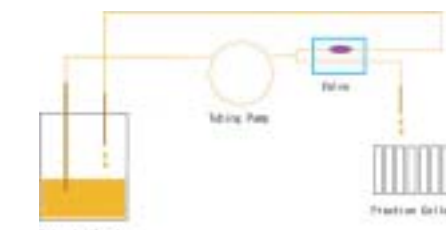

循環分取モード

| 品番 | 品名 | 仕様 | 価格 |
|---------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| SD0100 | 制御ユニット | 制御ボックス 4行20文字LCD チューピングポンプ | ¥300,000 |
| SD0010 | バイオラッド対応制御ソフト | 制御ユニットに組み込み・接続コード | ¥50,000 |
| BS0020 | 培養槽用ボトルキャップ | GL-45 PEEK製 φ3mmチューブ対応 | ¥25,000 |
| SSP0100 | バイオラッド対応ノズルユニット | PEEKノズルφ3mm 2個 ハンディコネクタ | ¥60,000 |
| SSP0200 | バイオラッド対応選択分取ユニット | PEEKノズルφ3mm 2個 ハンディコネクタ ピンチバルブ1個 | ¥140,000 |
| | | 3方コネクタ ハンディコネクタ バルブ支持板 1個 | |
| SSP0300 | バイオラッド対応セグメント分取ユニット | PEEKノズルφ3mm 2個 ハンディコネクタ ピンチバルブ2個 | ¥240,000 |
| | | 3方コネクタ 2個 ハンディコネクタ バルブ支持板 2個 | |
| SSP0400 | バイオラッド対応循環分取ユニット | PEEKノズルφ3mm 3個 ハンディコネクタ ピンチバルブ1個 | ¥160,000 |
| | | 3方コネクタ ハンディコネクタ バルブ支持板 1個 | |

フラクションコレクターの価格は含まれておりません
仕様、価格は予告なく変更することがございますのでご容赦ください。
価格には消費税は含まれていません。 本カタログは2016年10月現在のものです。

株式会社システムバイオティックス
〒252-0203
神奈川県相模原市中央区東淵野辺 1-13-1-504
TEL 042-786-0340 FAX 042-786-0341
E-mail: info@systembiotics.com

面倒な分取を自動で

自動サンプリング装置

SampleCollector20

市販のフラコレを利用できます



コネクタ・チューブはオートクレーブ可能です。

培養液・反応液の自動サンプリングに

市販のフラコレを利用した正確なサンプリングが出来ます

- チュービングポンプでサンプルを分取します。
- 一定時間ごとに反応液をサンプリングします。
- 培養などの滅菌・密閉系にも対応しています。
ポンプモーターはパルス制御で、正逆回転速度制御など正確な分取を行います
- 空気分節での分取方法で液ロスを最低限に。

特 徴

- いろいろな分取方法に対応しています。
- 3方コネクタ・ノズルはPEEK製で、オートクレーブ可能です。
- GL-38, GL-45のボトルキャップを用意しています。
- Bio-Rad Model 2110 フラコレを使用します。
- チューブはシリコンチューブを使用しています。
- コネクタもPEEKハンディコネクタで簡単に接続できます。
- バルブは使いやすいピンチバルブを採用しています。

条件設定などは見やすい4行20文字のLCDにて行います。



一定時間ごとに、目的量の反応液のサンプリングを行います。割り込みでの分取が可能です。